

Autopiqueur à usage unique

1 seule référence

3 profondeurs de piqûre



Une adaptation à tous les types de peau pour un plus grand confort du patient



Profondeur de 1.3 mm

Usage pour peau fine ou si le volume de sang nécessaire est faible.




Profondeur de 1.8 mm

Usage pour peau normale ou si le volume de sang nécessaire est normal.



Profondeur de 2.3 mm

Usage pour peau épaisse ou si le volume de sang nécessaire est important.

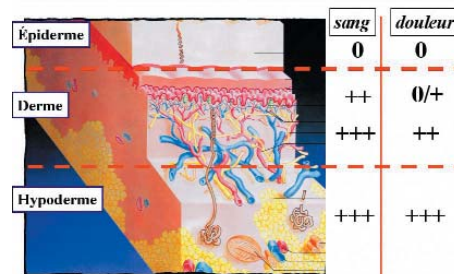

Ne jamais atteindre l'hypoderme (davantage de terminaisons nerveuses) pour une douceur maximale et pas de scarification.



Safe-T-Pro Plus, c'est surtout :

Le confort

- **3 positions réglables**
Plus grande flexibilité
Confort du patient amélioré
Obtention facile du volume de sang nécessaire
- **Rapidité de pénétration de l'aiguille (3 millisecondes)**
Limitation des traumatismes de la peau
- **Aiguille biseautée et siliconée**
Optimisation de la pénétration
Ajout de douceur

Mode d'emploi



1 Enlever le capuchon stérile en le tournant.



2 Choisir la profondeur de piqûre en réglant l'embout sur la position souhaitée.



3 Presser Safe-T-Pro Plus contre le doigt du patient et appuyer sur le bouton violet.

La sécurité et l'hygiène

- **Usage unique**
Réduit tout risque de contamination croisée
- **Rétractation automatique de l'aiguille**
Sécurité maximale

La facilité d'utilisation

- **Forme en T**
Meilleure prise en main
- **1 seule référence pour tous les patients**
Gestion des stocks simplifiée