

DOSSERET

DOSSERET MOULÉ EN MOUSSE VISCOÉLASTIQUE À MÉMOIRE DE FORME MULTIORTANCE

INDICATIONS

Amélioration du positionnement et du confort du patient dans son fauteuil. Prévention de l'instabilité sagittale (glisser-avant).

DOSSERET




MATÉRIAUX

**80
kg/m³**




Mousse Polyuréthane viscoélastique à mémoire de forme moulée

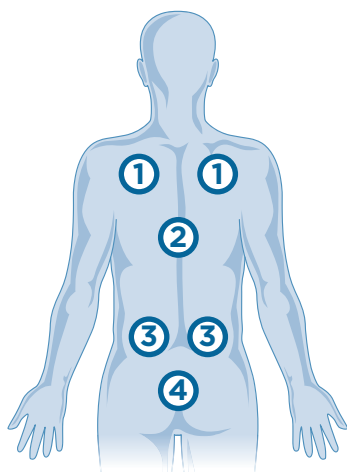


- ① OMOPLATES/ÉPAULES
- ② ZONE VERTÉBRALE
- ③ ZONE LOMBAIRE
- ④ ZONE SACRO-COCYGIENNE




SANS DOSSERET

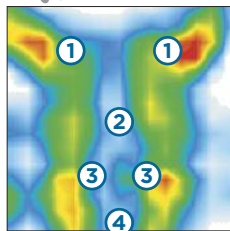

AVEC UN
DOSSERET
SIMPLE MOUSSE

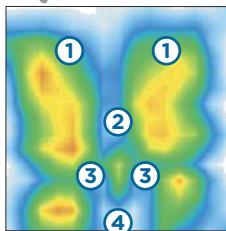

AVEC LE
DOSSERET
SYST'AM®

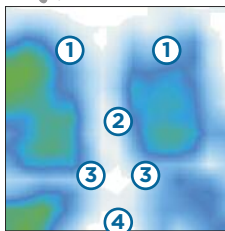

**EXISTE EN PACKS
THÉRAPEUTIQUES
FAUTEUILS**

➔ Voir page 44




MODÈLE		REF	Hauteur	Largeur	Épaisseur (max)
Dossieret mousse viscoélastique multiortance	taille Small	P951DS1HW	44 cm	39 cm	9 cm
	taille Standard	P951D1HW	49 cm	44 cm	9 cm
	taille Large	P951DL1HW	49 cm	50 cm	10 cm

HOUSSE POLYMAILLE® 

CE GARANTIE **2 ANS**

02/2016

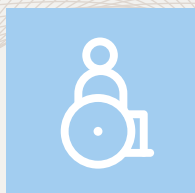

ENVIRONNEMENT
FAUTEUIL

DISPOSITIF COMPLÉMENTAIRE DU COUSSIN D'AIDE À LA PRÉVENTION DE L'ESCARRE

- Soulage de manière importante les points d'appuis de la zone vertébrale.
- Diminue le risque d'apparition d'escarre sacro-coccygienne du fait d'une diminution de l'instabilité sagittale (« glisser-avant »).
- Réduit les effets de cisaillements sur le plan sacro-fessier grâce à un meilleur maintien postural du bassin.



FORME ANATOMIQUE SPÉCIFIQUE

- Respecte la morphologie dorsale spécifique découlant d'une syphose (sillon vertébral).
- Respecte le creux lombaire, facteur important de la posture.

AUGMENTATION DU CONFORT DU PATIENT AU FAUTEUIL

- Excroissances latérales protégeant du contact direct des tubes de la zone axillaire/dorsale, souvent douloureuse, en particulier dans les cas d'utilisation intensive.

PRINCIPE DE MULTIORTANCE



- La multiportance assure une meilleure répartition des pressions grâce au transfert des appuis des zones de faible portance vers les zones de portance élevée :

ZONE BLANCHE :

Mousse blanche de portance moindre permet une libération des pics de pressions de la zone vertébrale et favorise la prise d'empreinte morphologique.

ZONE BLEUE :

Mousse bleue de portance supérieure permet la décharge des points d'appui à risques et accentue la stabilité latérale.

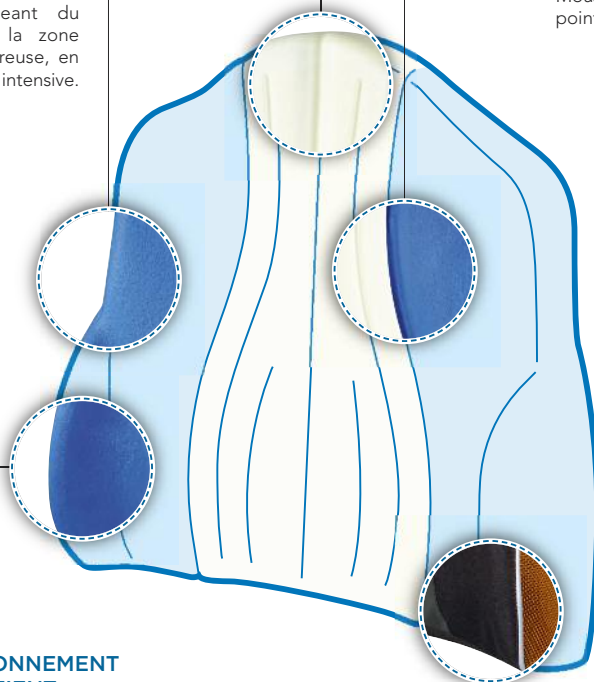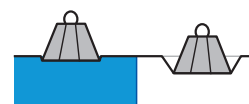

AMÉLIORATION DU POSITIONNEMENT ET DE LA STABILITÉ DU PATIENT

- Maintien de la zone du bassin permettant de prévenir le glisser-avant (instabilité sagittale) et le risque de chute, soucis permanent chez le sujet âgé, tant à domicile qu'en institution.
- Boudins latéraux assurant une diminution de l'instabilité latérale, fréquente chez les sujets handicapés.



SYSTÈME D'ACCROCHE UNIVERSELLE

- S'adapte à la plupart des modèles de fauteuil.


HOUSSE SPÉCIFIQUEMENT CONÇUE



- En regard de la zone dorsale, tissu de type enduction polyuréthane bi-extensible hautement respirante et imperméabilisée.



- Tissu de type toile enduite souple, résistante à l'abrasion et aux contraintes d'une utilisation quotidienne intensive.

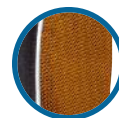


- Tissu technique hautement résistant positionné en regard des zones à forte contrainte d'abrasion.

PACKS THÉRAPEUTIQUES FAUTEUIL SYST'AM®


Référence	Désignation	Taille du coussin	Taille du dossier
PACK THÉRAPEUTIQUE VISCOFLEX® Standard & Dossieret			
PKCOUDOS10	Coussin VISCOFLEX® Standard + Dossieret	36 x 36 x 8 cm	Small (44 x 39 x 9 cm)
PKCOUDOS15	Coussin VISCOFLEX® Standard + Dossieret	38 x 38 x 8 cm	Standard (49 x 44 x 9 cm)
PKCOUDOS11	Coussin VISCOFLEX® Standard + Dossieret	42 x 42 x 8 cm	Standard (49 x 44 x 9 cm)
PKCOUDOS16	Coussin VISCOFLEX® Standard + Dossieret	42 x 46 x 8 cm	Standard (49 x 44 x 9 cm)
PKCOUDOS12	Coussin VISCOFLEX® Standard + Dossieret	45 x 42 x 8 cm	Large (49 x 50 x 10 cm)
PKCOUDOS13	Coussin VISCOFLEX® Standard + Dossieret	45 x 46 x 8 cm	Large (49 x 50 x 10 cm)
PKCOUDOS14	Coussin VISCOFLEX® Standard + Dossieret	51 x 46 x 8 cm	Large (49 x 50 x 10 cm)
PACK THÉRAPEUTIQUE VISCOFLEX®+ (technique) avec Butée pelvienne & Dossieret			
PKCOUDOS01	Coussin VISCOFLEX®+ avec Butée pelvienne + Dossieret	42 x 42 x 8 cm	Standard (49 x 44 x 9 cm)
PKCOUDOS02	Coussin VISCOFLEX®+ avec Butée pelvienne + Dossieret	45 x 42 x 8 cm	Large (49 x 50 x 10 cm)
PKCOUDOS03	Coussin VISCOFLEX®+ avec Butée pelvienne + Dossieret	45 x 46 x 8 cm	Large (49 x 50 x 10 cm)


COMPOSEZ VOUS-MÊME VOTRE PACK THÉRAPEUTIQUE FAUTEUIL SUR-MESURE

➤ Grâce au **conditionnement dorénavant unitaire de nos dossierets**, vous pouvez à présent aisément (en commandant les références coussins et dossierets séparément) composer votre **Pack Thérapeutique sur-mesure** !

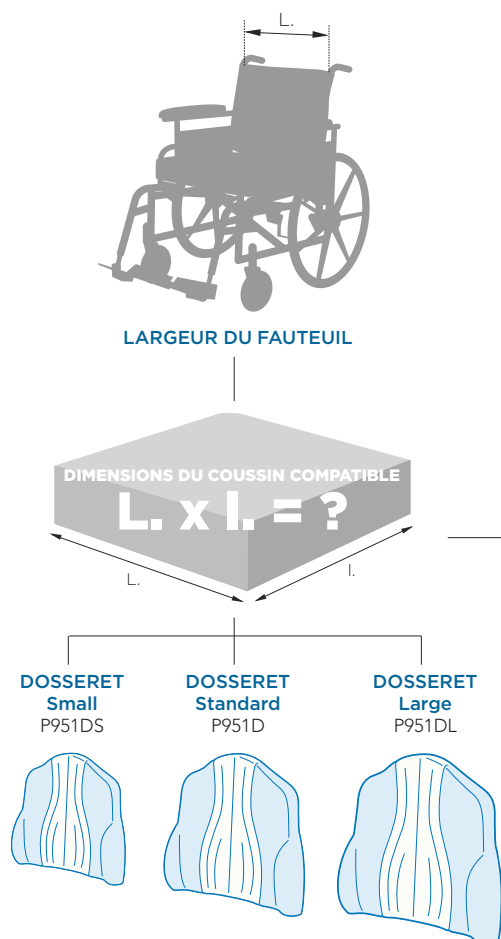

CONSULTEZ LE TABLEAU
DES COMPATIBILITÉS
COUSSINS/DOSSERETS
PAGE SUIVANTE

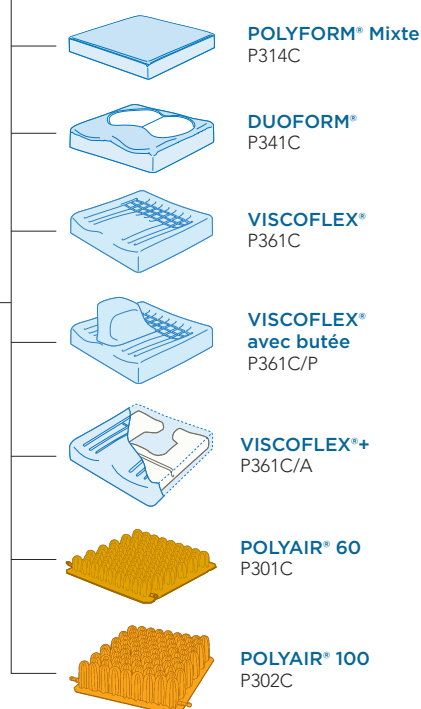


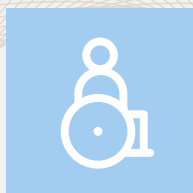

ENVIRONNEMENT
FAUTEUIL


AIDES TECHNIQUES À LA POSTURE ASSISE

DOSSERET

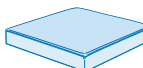LARGEUR DU FAUTEUIL (cm)	30/32	34/36	38		40				43/44	45				48/50		55	60			
TAILLES DE COUSSINS DISPONIBLES (cm)	32 x 32 cm	36 x 36 cm	38 x 38 cm	38 x 43 cm	40 x 40 cm	40 x 43 cm	40 x 46 cm	42 x 42 cm	42 x 46 cm	43 x 43 cm	45 x 42 cm	45 x 43 cm	45 x 46 cm	46 x 40 cm	46 x 46 cm	48 x 43 cm	51 x 46 cm	51 x 50 cm	56 x 46 cm	61 x 50 cm
Correspondance TAILLE - MODÈLE COUSSINS																				
 POLYFORM® Mixte P314C					●							●								
 DUOFORM® P341C		●						●	●		●		●				●			
 VISCOFLEX® P361C (●) P361C/L (●)		●	●		●			●	●		●	●	●			●	●	●		
 VISCOFLEX®+ P361C/A	●	●	●	●	●			●	●		●		●			●	●	●	●	●
 VISCOFLEX®+ avec butée P361C/P								●			●		●							
 POLYAIR® 60 P301C		●			●	●	●			●				●	●		●	●		
 POLYAIR® 100 P302C					●	●	●			●				●	●		●	●		
COMPATIBILITÉ DES TAILLES COUSSINS - DOSSERETS																				
 Dosseret SMALL P951DS1HW	+	+	+	+																
 Dosseret STANDARD P951D1HW (+)		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+							
 Dosseret LARGE P951DL1HW								+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		

RECOMMANDATIONS

➤ Prévoir une assise de profondeur + 3 cm si emploi d'un dossier

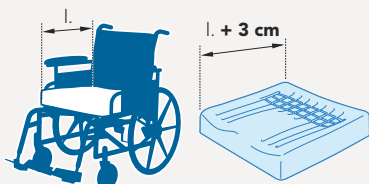

➤ Toujours poser le dossierer sur le coussin

